



# Силовое Оборудование



Инструменты, оборудование  
расходные материалы для  
ветеринарии

## Дрель ветеринарная, канюлированная, стандарт, BALF

- + Специализированная ветеринарная низкооборотистая канюлированная дрель Бальф, зарекомендовала себя в качестве надежного и долговечного помощника среди травматологов и ортопедов.
- + Дрель имеет съемный патрон, что облегчает его обработку и стерилизацию.
- + Специальный переходник позволяет не нарушая стерильности заменить аккумулятор во время операции.
- + Аккумулятор надежно крепится в устройстве.
- + Наличие канала позволяет фиксировать длинные спицы и сверла.
- + На тыльной стороне располагается реверс.
- + Курок дрели чувствителен к нажатию и четко регулирует обороты патрона.
- + Дрель полностью герметична и может подвергаться стерилизации после извлечения аккумулятора.



Материал	Нержав. сталь и алюмин. сплав
Стерилизация	Автоклав не более 135 гр °С
Кол-во оборотов	0 – 1000 об/мин
Крутящий момент	7,5 Н/м
Уровень шума	Не более 65 Дб
Диаметр канала	4 мм

### В комплекте


- + Ключ для патрона, 8,0 мм, BALF
- + Патрон трехкулачковый для дрели, BALF
- + Две батареи аккумуляторные, Ni-Mh
- + Док-станция, 220 В
- + Кейс для транспортировки

**08050200** Весь комплект



Видео о дрели  
[clck.ru/36MDdx](https://clck.ru/36MDdx)

## Дополнительно к дрели

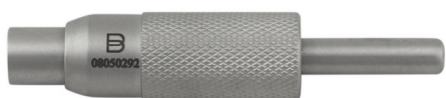

Переходник АО для сверел, быстрое соединение, BALF®

08050292



Аккумуляторная батарея, Ni-Mh

08050203

## Техническая аккумуляторная ортопедическая дрель

Сложно представить остеосинтез без дрели. Любой метод, будь то накостный, или внеочаговый, или интрамедуллярный остеосинтез, требуют сверления кости.

Специализированные ветеринарные(медицинские) дрели, стоят дорого и доступны не для каждого. К тому же, если клиника не специализируется на травматологии и остеосинтез достаточно редкое явление, то можно рассмотреть альтернативные, более доступные варианты дрелей.

Компания «Бальф» следит за тенденциями рынка и предлагает ветеринарам адаптированный вариант технической дрели, позволяющий получить функционал специального инструмента.

Мы добавили к техническому инструменту канюлированный переходник и трехкулачковый патрон выполненные из медицинской стали. Это позволило получить канал 150 мм, что удобно при работе со спицами. Также патрон и переходник могут подвергаться стерилизации – это влияет на стерильность при выполнении операций. Нами подобраны модели технических шуруповертов, которые имеют небольшой вес, удобный реверс, Li-Ion аккумуляторы и высокое качество.

Дополнительно, можно купить чехол, который надевается непосредственно на шуруповерт, что также повышает чистоту при выполнении операций. Чехол можно стирать и стерилизовать.

В комплект поставки входит:  
кейс, два аккумулятора, зарядное устройство

**080502004** В кейсе Metabo

**080502001** В кейсе Milwaukee

### К ней необходимы:

**080502003** Переходник для большого патрона трехкулачкового, Jacobs

**08050208** Патрон трехкулачковый, Jacobs, большой ( укомплектован ключом )

**08050211** Ключ большой для патрона трехкулачкового, Jacobs



## Многофункциональная моторная система

Универсальное силовое оборудование для ветеринарной травматологии.

Канюлированная аккумуляторная дрель с 5-ю сменными насадками, которые позволяют с легкостью решать любые задачи.

Две насадки для спиц позволяют одинаково быстро проводить спицы диаметром 0.6 и 3.0 мм

Патрон с АО соединением сэкономит вам время при смене сверел и инструмента

Насадка «сагиттальная пила» обеспечит быстрый и точный распил

Ну а трехкулачковый патрон, как всегда, максимально универсален.



### Комплект моторной системы

- + Батарейный отсек
- + Батарея аккумуляторная
- + Устройство зарядное
- + Асептический переходник

**08050283** Артикул комплекта



Видео о дрели  
[clck.ru/36Zfdp](http://clck.ru/36Zfdp)

## Дополнительно к моторной системе



**Батарейный отсек**

08050289



**Батарея аккумуляторная**

08050287



**Устройство зарядное**

08050288



**Асептический переходник**

08050212



**Ключ для патрона трехкулачкового**

08050286

## Дополнительно к моторной системе



Проводник спиц 0.8-2.5 мм  
08050201



Проводник спиц 1.5-3.2 мм  
08050205



Патрон АО соединение  
08050291




Патрон трехкулачковый +  
Ключ для патрона  
08050290




Сагиттальная пила  
08050204


## Пильные полотна для многофункциональной модульной системы, BALF

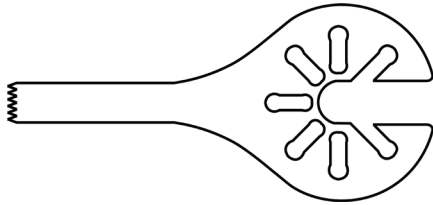

Пильное полотно  
**08050408** 25 × 5 × 0.5 мм

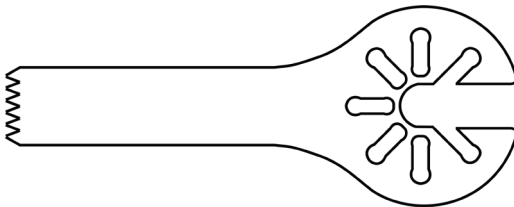

Пильное полотно  
**08050409** 35 × 5 × 0.5 мм

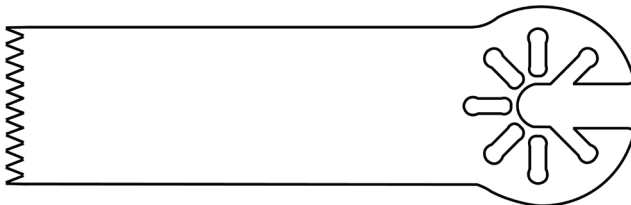

Пильное полотно  
**08050417** 50 × 20 × 0.7 мм



## Сагиттальная пила BALF малая

Используется для распила малых фрагментов: резекция головки бедра животным кг до 15, распил челюсти, носа, черепа, остеотомии у мелких и средних собак и пр.

Материал	Нержавеющая сталь
Амплитуда колебания	До 4 °
Частота колебаний	0-15000/мин
Уровень шума	Не более 75 Дб
Стерилизация	Автоклав не более 135° С
Полный заряд батареи	3 часа
Вес с аккумулятором	0,9 кг



### В комплекте

- + Пила сагиттальная
- + Платформа зарядная
- + Батарея – 2 штуки
- + Асептический переходник
- + Чемодан для транспортировки и хранения

**08050278** Артикул комплекта



Видео о пиле  
[clck.ru/36MCGm](http://clck.ru/36MCGm)



















## Дополнительно к малой сагиттальной пиле

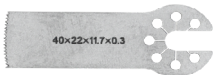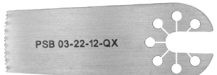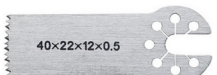

**Батарея аккумуляторная, для пилы малой, BALF**

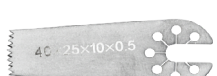**08050202**
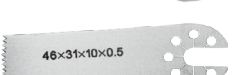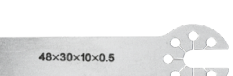
## Пильные полотна к малой сагиттальной пиле

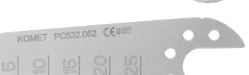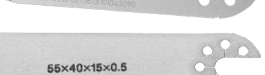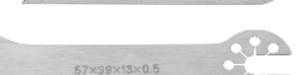	Артикул	Длина общ. / рабоч.	Ширина	Толщина распила
	<b>08050494</b>	37 / 22 мм	12 мм	0.3 мм
	<b>08050495</b>	37 / 22 мм	15 мм	0.5 мм
	<b>08050492</b>	40 / 22 мм	11.7 мм	0.3 мм
	<b>080504105</b>	40 / 22 мм	12 мм	0.3 мм
	<b>08050415</b>	40 / 22 мм	12 мм	0.5 мм
	<b>08050493</b>	40 / 22 мм	7.9 мм	0.3 мм
	<b>08050414</b>	40 / 22 мм	8 мм	0.5 мм
	<b>080504101</b>	40 / 25 мм	10 мм	0.5 мм
	<b>080504100</b>	40 / 25 мм	8 мм	0.5 мм
	<b>080504106</b>	43 / 25 мм	9.5 мм	0.5 мм
	<b>08050497</b>	46 / 31 мм	10 мм	0.5 мм
	<b>080504104</b>	48 / 30 мм	10 мм	0.5 мм
	<b>08050416</b>	49 / 31 мм	9.5 мм	0.5 мм
	<b>080504103</b>	50 / 35 мм	13 мм	0.8 мм
	<b>08050410</b>	50 / 39 мм	13 мм	0.5 мм
	<b>08050496</b>	55 / 40 мм	15 мм	0.5 мм
	<b>08050464</b>	57 / 39 мм	13 мм	0.5 мм
	<b>080504102</b>	68 / 50 мм	14 мм	0.5 мм

## Сагиттальная пила BALF большая

Используется для средних и крупных фрагментов: резекция головки ТБС у средних и крупных собак, остеотомии бедра/голени у крупных собак и пр.

Пила сагиттальная предназначена для осцилляторного пиления средних и крупных фрагментов. Позволяет проводить любые типы остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей.

Может быть использована в различных областях ветеринарной медицины: в травматологии, ортопедии, хирургии, нейрохирургии и др.

- Эргономичный дизайн
- Есть возможность автоклавирования



Материал	Нержавеющая сталь
Амплитуда колебания	До 4 °
Частота колебаний	0-15000/мин
Уровень шума	Не более 75 Дб
Стерилизация	Автоклав не более 135° С
Полный заряд батареи	3 часа
Вес с аккумулятором	1.35 кг

### В комплекте

- + Пила сагиттальная
- + Платформа зарядная
- + Две батареи
- + Асептический переходник
- + Чемодан для транспортировки и хранения

**08050267** Артикул комплекта



Видео о пиле  
[clck.ru/36MCGm](http://clck.ru/36MCGm)

## Дополнительно к большой сагиттальной пиле



Батарея аккумуляторная, для пилы/ дрели стандарт BALF

08050203

## Пильные полотна для сагиттальной пилы BALF

	Артикул	Длина общ. / рабоч.	Ширина	Толщина Распила
	08050491	78 / 50 мм	13 мм	0.8 мм
	08050488	98 / 70 мм	22 мм	0.8 мм
	08050489	98 / 70 мм	24 мм	1.0 мм
	08050490	98 / 70 мм	25 мм	0.8 мм



## Переходник для технической пилы



**Переходник для технической пилы Винт - BALF, Bosch**

**08050207** Резьба М6

## Полотна к переходнику



Артикул	Длина	Ширина	Толщина полотна	Толщина распила
<b>080504110</b>	15 мм	6.9 мм	0.3 мм	0.4 мм
<b>080504111</b>	22 мм	7.9 мм	0.3 мм	0.4 мм
<b>080504112</b>	22 мм	11.7 мм	0.3 мм	0.4 мм
<b>080504108</b>	25.5 мм	9.5 мм	0.4 мм	0.6 мм
<b>080504115</b>	27 мм	7.4 мм	0.4 мм	0.7 мм
<b>080504116</b>	27 мм	10.9 мм	0.4 мм	0.7 мм
<b>080504117</b>	27 мм	14.3 мм	0.4 мм	0.7 мм
<b>080504113</b>	31 мм	6.1 мм	0.3 мм	0.4 мм
<b>080504114</b>	31 мм	10.1 мм	0.3 мм	0.4 мм
<b>080504107</b>	41 мм	14 мм	0.4 мм	0.6 мм
<b>080504118</b>	50 мм	10.2 мм	0.4 мм	0.7 мм
<b>080504119</b>	50 мм	14.1 мм	0.4 мм	0.7 мм
<b>080504120</b>	50 мм	19.8 мм	0.4 мм	0.7 мм
<b>080504121</b>	50 мм	26.5 мм	0.4 мм	0.7 мм



Артикул	Длина	Ширина	Толщина полотна	Толщина распила
<b>08050441</b>	25 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
<b>08050485</b>	25 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
<b>08050486</b>	35 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
<b>08050442</b>	35 мм	10 мм	0.5 мм	0.8 мм
<b>08050443</b>	35 мм	20 мм	0.5 мм	0.8 мм
<b>08050444</b>	50 мм	10 мм	0.5 мм	0.8 мм
<b>08050445</b>	50 мм	15 мм	0.5 мм	0.8 мм
<b>08050446</b>	50 мм	20 мм	0.7 мм	0.9 мм
<b>08050447</b>	50 мм	25 мм	0.7 мм	0.9 мм

## Пила для TPLO, Стандарт BALF

Пожалуй, самое важное, при выполнении любой остеотомии – это остеотомия!

Ровный распил, одинаковой толщины на всем протяжении, получается только с помощью острого пильного полотна и специальной пилы.

Размер	Длина 290 мм, диаметр 55 мм
Вес	0.9 кг
Частота колебаний	0-16000/мин ( $\pm 10\%$ )
Ход кнопки	10 мм
Амплитуда движений	11.5 °С
Уровень шума	не более 75 Дб
Стерилизация	Автоклав 121 -134° С
Полная зарядка аккумулятора	3 часа

### В комплекте


- + Пила
- + Два аккумулятора
- + 3 винта для пильных полотен
- + Зарядное устройство
- + Кейс для транспортировки

**08000016** Артикул комплекта



Видео о пиле  
[clck.ru/36Zocz](http://clck.ru/36Zocz)

## Дополнительно к пиле для TPLO **080502067**

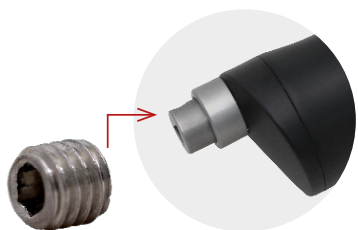

**Винт для фиксации пильного полотна M5 TPLO, BALF®**

**08000002**



**Зарядное устройство для пилы для TPLO, BALF®**

**08000021**



**Батарея аккумуляторная для пилы для TPLO, Ni-Mh, BALF®**

**08000020**



**Кейс для стерилизации, для пилы TPLO**

**08000018**

## Пила для TPLO, BALF

Вес	0.8 кг
Частота колебаний	0-16000/мин ( $\pm 10\%$ )
Амплитуда движений	11.5 градусов
Уровень шума	не более 75 Дб
Стерилизация	автоклав 121-134° С
Полная зарядка аккумулятора	2 часа



### В комплекте

- + Пила
- + Два аккумулятора
- + Асептический переходник
- + Зарядное устройство
- + Кейс для транспортировки


**08000000** Артикул комплекта



Видео о пиле  
[clck.ru/36ZouC](http://clck.ru/36ZouC)



## Дополнительно к пиле для TPLO 08000000

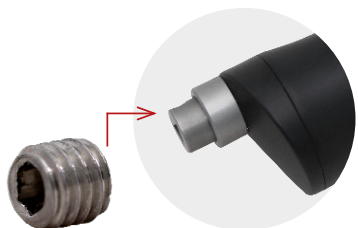

Винт для фиксации пильного полотна M8 TPLO, BALF®

08000008



Зарядное устройство для пилы TPLO, BALF®

08000010



Батарея аккумуляторная для пилы TPLO, BALF®

08000007



Кейс для стерилизации, для пилы TPLO

08000018

## Полотна для пил TPLO



30мм

24мм

18мм

### Полотна пильные для TPLO, BALF®


Сменное, цельное, мелкий зуб

Артикул Радиус

**08001803** 18 мм

**08002403** 24 мм

**08003003** 30 мм

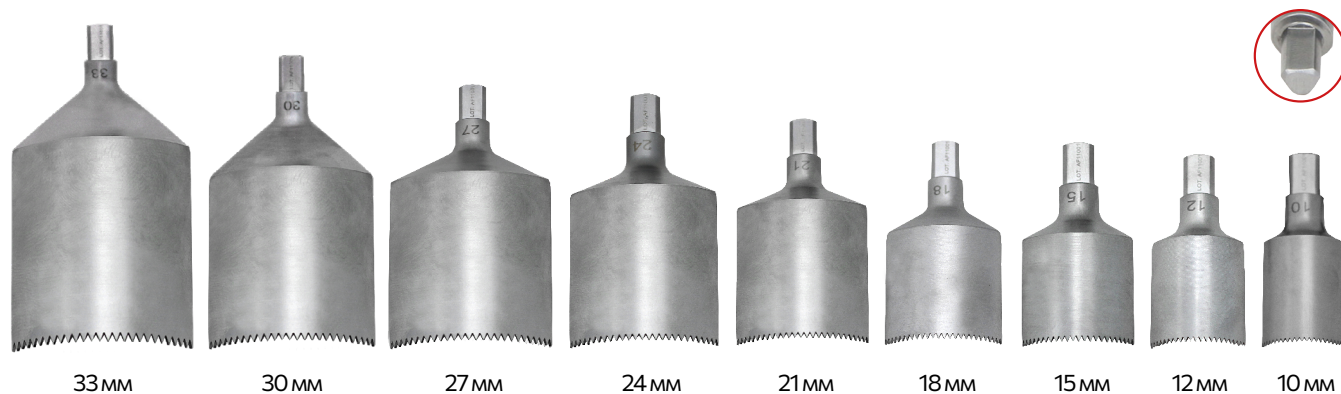

33мм

30мм

27мм

24мм

21мм

18мм

15мм

12мм

10мм

### Полотна пильные для TPLO, BALF®

Сменное, цельное

Артикул Радиус

**08000801** 8 мм      **08002102** 21 мм

**08001002** 10 мм      **08002402** 24 мм

**08001202** 12 мм      **08002702** 27 мм

**08001502** 15 мм      **08003002** 30 мм

**08001802** 18 мм      **08003302** 33 мм

**08002001** 20 мм



**Полотна пильные для TPLO, AESCULAP®**

Сменное

Артикул    Радиус

<b>08001200</b>	12 мм	<b>08002400</b>	24 мм
<b>08001500</b>	15 мм	<b>08002700</b>	27 мм
<b>08001800</b>	18 мм	<b>08003000</b>	30 мм
<b>08002000</b>	20 мм		

## Переходник для технической пилы



Переходник для технической пилы Винт - BALF, TPLO, Bosch  
08000001 Резьба М6

## Полотна к переходнику



30 мм

24 мм

18 мм

### Полотна пильные для TPLO, BALF®

Сменное, цельное, мелкий зуб

Артикул	Радиус
08001803	18 мм
08002403	24 мм
08003003	30 мм

Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 17, корпус 2

8 812 509 63 93

[zakaz@ooobalf.ru](mailto:zakaz@ooobalf.ru)

Москва, Научный пр-д, д. 19, БЦ «9 акров», офис 1

8 495 150 43 61

[zakaz.msk@ooobalf.ru](mailto:zakaz.msk@ooobalf.ru)

Краснодар, ул. Энергетиков, д. 4

8 861 207 29 97

[za@ooobalf.ru](mailto:za@ooobalf.ru)

Звонки по всей России

8 800 333 13 98